

CRUMA ECO²

ECO² е новата камина, разработена от Cruma по искане на нашите клиенти. Нашият изследователски и развоен отдел създаде този нов модел, следвайки два основни принципа: **Икономия** и **Екология**. Оттук идва и името му. ECO² отговаря на нуждите на всеки развиващ се пазар, който е в непрекъснато търсене на нови продукти. Моделът предлага на средата и на служителите в лабораторията характеристиките, функционалността и качеството, притежавани от всички продукти Cruma.

ECO² е преминал всички изпитвания за качество и безопасност, които са проведени и на всички останали камини Cruma, с което покрива изискванията на всички наши клиенти.

ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА – Токсичните химически продукти не излизат навън, а се задържат от филтъра.

СПЕСТЯВАНЕ НА РАЗХОДИ И БЪРЗА НАСТРОЙКА – Не се налага да се извършват строителни работи по монтаж на тръби за отвеждане на газа навън, което означава по-малко проблеми за всяка лаборатория, работеща с пълен капацитет.

ГЪВКАВОСТ – Може да се използва на места, където е трудно да се отстри/изведе замърсеният въздух, като например от по-ниски нива на многоетажни сгради.

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ – Засмуканият въздух не се отвежда, а рециркулира обратно в лабораторията след премахване на замърсяващите вещества. Това означава, че не е необходимо да се повишава използването на климатичните или отоплителните системи с цел компенсиране на отведения въздух.

СЕРТИФИЦИРАНЕ – Моделът е произведен в Испания и е сертифициран от външна лаборатория в съответствие с международните стандарти и при прилагане на критериите на ISO 9001.



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Приложение в общата химия, в която се използват малки количества реактиви или химически съединения при околна/умерена температура във всички видове лаборатории:

- ✓ Изследователски лаборатории
- ✓ Лаборатории за контрол на качеството
- ✓ Клинични и болнични лаборатории
- ✓ Университетски и училищни лаборатории

...Най-общо казано - във всички видове лаборатории.

МОНТИРАНО СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

Механичен анемометър	Механична сонда за постоянен контрол на скоростта на въздушния поток в предната част
Контрол на филтъра	Система за откриване на насищането на филтъра
Осветление	Вградено LED осветление
Гаранция	2 г.

ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Основен пакет ECO ²	Тавичка за задържане на разлята течност (2-10 л) с работна повърхност от иннокс-304
--------------------------------	---

ОСНОВНА КОНСТРУКЦИЯ


Метални части: базова рамка, задна стена и горна част	1,2 mm поцинкована стомана с антикиселинна полимерна смола на прах, втвърдена чрез нагряване на 200°C
Врати	Прозрачен полиметилметакрилат с дебелина 6 mm (трансмисия на светлина 93%)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Брой филтрационни колони	1
Брой филтри	1 до 2
Брой вентилатори IP44	1
Среден обем обработен въздух	159 m ³ /h
Средна скорост на въздушния поток	0,50 m/s
Вътрешен обем на шкафа	0,287 m ³
Обновления в шкафа / min	9,25
Обща консумация на електроенергия	47 W
Напрежение - Честота	110-220 V - 50-60 Hz
LED светлина	16W - 1500lm
Ниво на шум	55 dB
Опаковка: 100% рециклиран дървен сандък	Обем 0,42 m ³
С международен фитосанитарен сертификат	Тегло 65 Kg

РАЗМЕРИ (mm)

Външни			Вътрешни		
Шир.	Дълб.	Вис.	Шир.	Дълб.	Вис.
798	600	1012	778	569	760

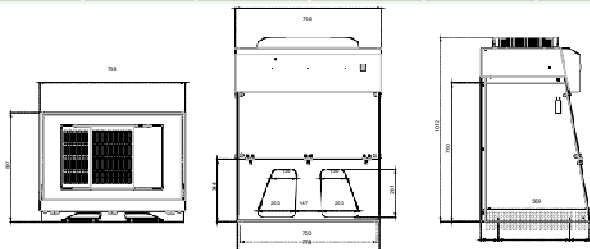

Това не е печатна грешка -
2 години гаранция

.....Защото сме убедени в качеството на.....
нашите продукти.



*За повече информация:
www.cruma.es

Добра изработка, сигурна пратка.
Нашето отговорно опаковане

Дървен сандък 100% рециклируем, с
международен фитосанитарен сертификат.



Имате ли нужда от помощ или
техническо съдействие?

Свържете се с вашия дистрибутор или ни се обадете, ако имате въпроси или се нуждаете от техническа поддръжка, резервни части, сервизно обслужване...

+34 93 370 61 62